

No.

保証書

持込修理

品名	家庭用美容器	型番	PSM-180
形名	ヴェーダニードルスパ BS for Salon		
無料修理保証	対象部分：本体のみ	期間：	お買い上げ日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※製造から相当の期間を経ており修理・交換用品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかわらず、保証を打ち切らせて頂く場合がございます。

その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ

「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)

および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>) をご確認ください。

・個人情報の取扱いについて

個人情報の取扱いについては弊社ホームページ

(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。

・利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの規則は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

発売元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)



www.ya-man.com/biz/professional/

PROFESSIONAL
YAMAN


保管用
保証書付

取扱説明書

家庭用美容器

ヴェーダニードルスパ BS for Salon

PSM-180

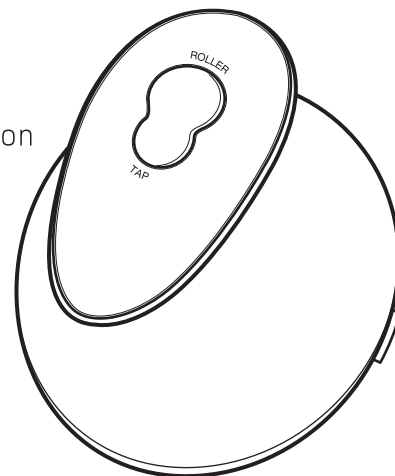

もくじ

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	6
各部のなまえ	7
ご使用前に	10
使いかた	15
使い終わったら	23
こんなときには	26
アフターサービス	28
●製品仕様	29
●保証について	30
保証書	31

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のままで使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招くおそれがあります。

- ◆医用電気機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電気機器
 - ・心電計などの装着型医用電気機器



禁止



警告

●次のような人は使用しない。

- ・心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- ・幼児や自分で意思表示できない人
- ・温度や刺激の感覚が自覚できない人・自己免疫疾患のある人

●次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- ・急性疾患の人・感染症疾患の人・悪性腫瘍のある人
- ・有熱性疾患の人・高血圧の人や血液疾患のある人・発熱している人
- ・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人
- ・神経障害のある人・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- ・通院して薬を服用中の人・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

●指定の部位以外や次のような部位には使用しない。

- ・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合・酒気帯びの場合
- ・口内や陰部、粘膜など・眼球・まぶた(眼窩)・のど
- ・膨らんだホクロ・ウイルス性のイボ・骨折をしている部位
- ・美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位

※施術後2週間をご使用を控えていただき、医師にご相談の上問題なければご使用いただけます。

(施術例：ヒアルロン酸注入、シリコン注入、ボトックス、糸リフト、二重整形、HIFU等)

自分の意思表示をできない人には使わせない。子供や身体の不自由な人だけの使用は避ける。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。子供の手の届かない場所に保管する。また、遊ばせない。

事故・けがの原因となります。



使用者の制限

動作中にアタッチメントの間に指を入れない。

アタッチメントに指を挟み込み、けがの原因となります。



禁止



用途以外
禁止

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けが・故障の原因となります。



傷んだ
コードプラグ
使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

警告



無理な扱い
禁止

ACアダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。



浴室充電
禁止

浴室内での充電は絶対にしない。感電・ショート・発火の原因となります。



落下禁止

不安定な場所に置かない。また、本体を落としたり、ぶつけたりしない。けが・故障の原因となります。



必ず守る

使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、頭皮やお肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。万一、頭皮やお肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。



必ず守る

充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。



タコ足配線
禁止

本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。



異臭・
異常発熱時
使用禁止

異臭・異常発熱したときは使用を中止する。破損・発火の原因となります。



必ず守る

顔に使用するときには必ずLOモードで使用し、強く押しあてない。事故・けがの原因となります。



必ず守る

交流100V～240Vで使用する(日本国内専用)。ACアダプターは、根元まで確実に差し込む。海外での使用の際は必ずプラグ形状の電圧を確認のうえ使用する。



必ず守る

取扱説明書に記載されている用途以外は使用しない。けが・故障の原因となります。

警告



必ず守る

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。感電・ショート・発火の原因となります。



ACアダプター
を抜く

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



プラグを抜く

コンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。



発火注意

火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。また、火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。また、熱器具に近づけない。本製品は充電式電池を内蔵しています。発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

注意



禁止

次に該当する人は使用しない。

髪の毛がからみつきの髪を傷める原因となります。
・ 植毛をされている人。
・ 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。



禁止

次の項目は行わない。

事故・トラブルの原因となります。
・ ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
・ 過度に1ヶ所に集中して使用しない。
・ 髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。



禁止

ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーで本体を乾燥させない。本体の変形・故障の原因となります。

注意



禁止

本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。

本体表面の損傷の原因となります。



禁止

水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。

本体の故障の原因となります。



必ず守る

使用時間を守って使用する。
1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用する。顔に使用するときは、顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安に使用する。

過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。



必ず守る

入浴剤入りのお湯や温泉、サウナでは使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。

におい・変色・故障の原因となります。



必ず守る

アタッチメントに傷などの異常がないか確認してから使用する。

けが・故障の原因となります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。



必ず守る

使用時には身体からアクセサリや金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。

アクセサリ類を巻き込む原因となります。



必ず守る

シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。

本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。



必ず守る

初めて使用するときは慣れるまでは、必ずLOモードから使用する。

事故・けがの原因となります。



必ず守る

使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。

本体がぬれたままの状態では放置すると、充電端子が腐食する原因となります。



禁止

軽くあて、絶対に強くあてない。

けが・故障の原因となります。痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。



必ず守る

使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。

髪の毛がからみつき、髪を傷める原因となります。

海外でのご使用について



警告



必ず守る

必ず交流100～240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。




発火注意

必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発熱・発火・故障の原因となります。


- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

各部のなまえ

●本体

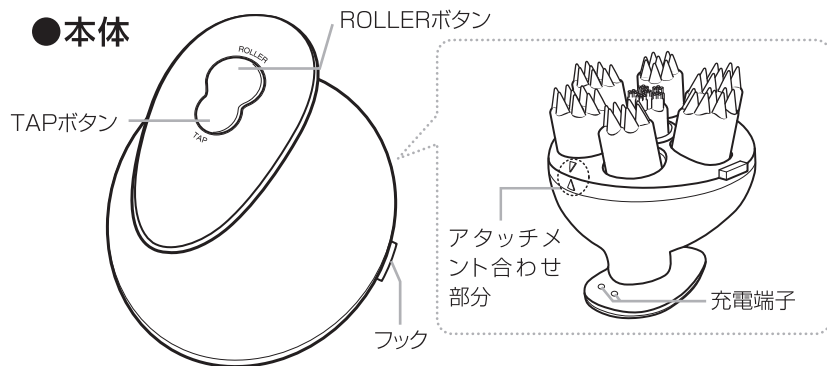

アタッチメントを外したところ

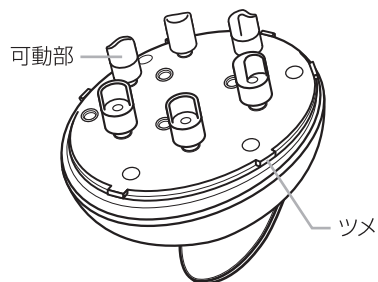


●付属品

・ニードルアタッチメント


頭皮専用です。

※お買い上げ時は、本体にセットされています。

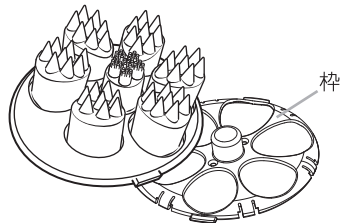


・もみ出しアタッチメント

頭皮・顔・首・肩に使用できます。

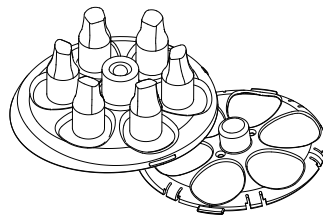

アタッチメントの枠は着脱可能です。枠の取り付けかたについては、「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.13)を参照してください。

・充電台

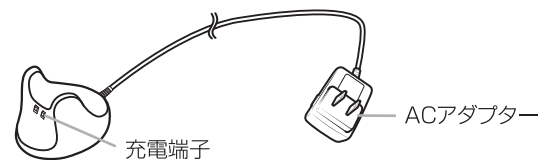

※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

はたらき

●安全機能

アタッチメントを強く押しつけたり、髪の毛がからみつくなど一定の負荷がかかると、安全機能が働き、動作が一瞬停止します。

連続して数回強く押しつけるとモードランプが点滅し、電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。

電源が切れた場合は、再度電源をオンにしてからモードを選択してください。

●防水機能

本体は防水仕様(IPX7)になっています。シャワーや浴槽の中でも使用することができます。充電台は防水ではありません。



●浴室での充電は絶対にしない。
感電・ショート・発火の原因となります。




●水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因となります。

●モードとランプ表示

●スピード表示ランプ(ROLLERモード)

ROLLERボタンを長押し(約3秒)すると、スピード表示ランプが1つ点灯し、電源がオン(LOモード)になります。電源がオンの状態でROLLERボタンを押すたびに、スピードが切り替わります。

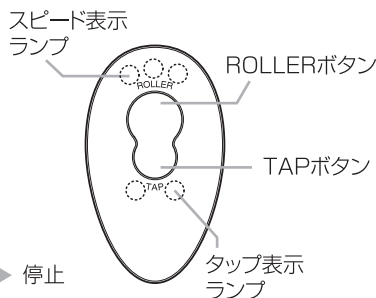

LO (電源オン) → MID → HI → 停止

	ランプ表示	説明
LO	●○○○	遅いスピードで動きます。初めて使用するときや使いかたに慣れるまでは、LOで使用してください。またお顔に使用するときもみ出しアタッチメントでLOを選択し使用してください。
MID	●●○○	中間のスピードで動きます。
HI	●●●○	速いスピードで動きます。使いかたに慣れてきたら使用してください。
停止	○○○○	動作が停止します。

●タップ表示ランプ(TAPモード) バイブレーションを組み合わせ使用できます。

タップ1 → タップ2 → 停止
(電源オン)

TAPボタンを長押し(約3秒)すると、タップ表示ランプが1つ点灯し、電源がオン(タップ1)になります。電源がオンの状態でTAPボタンを押すとタップが切り替わります。お好みで使い分けてください。

	ランプ表示	説明
タップ1	●○○○	優しく振動します。初めて使用するときや、使いかたに慣れるまでは、タップ1を使用してください。また、お顔に使用するときもみ出しアタッチメントでタップ1を選択し使用してください。
タップ2	●●○○	より多めの振動がお好みのかたにオススメです。
停止	○○○○	動作が停止します。

※動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。(オートオフ機能)
ROLLERモードとTAPモードは、別々でも同時にでも使用できます。

充電のしかた

初めて使用するときや充電残量が減ったときは充電をしてください。

- ・購入後初めて充電を行うときは、完全に充電が完了するまで使用しないでください。
- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったときは、満充電表示でも短時間しか使用できないことがあります。

●充電時間の目安

充電時間	動作時間
約3時間	約20分

※充電環境 室温約25℃において
※満充電直後からの動作時間です。
※電池の残量や充電環境によって、
充電時間や動作時間は前後します。


1 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

2 本体を充電台の充電端子が触れるように図のように充電台に置く。

- ・本体と充電端子の水滴をしっかりと拭き取ってください。
- ・充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
- ・充電中は充電残量に応じて、ランプが順に点滅します。
- ・充電が完了すると、ランプが点灯に変わります。
- ・電池の残量や充電環境によって、充電時間は前後します。



ランプが点灯しない場合は正しく充電できていません。斜めにならないよう、真っ直ぐに置いてください。

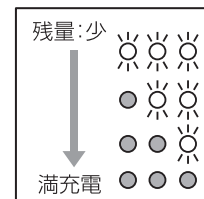

3 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜き、本体を充電台から外す。




- 本製品には必ず専用の充電台を使用する。また、ACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。感電・ショート・発火の原因となります。
- 充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電・ショート・発火の原因となります。

アタッチメントの取り付けかた・取り外しかた

●取り付けかた


- 1 本体の可動部とアタッチメントの穴を合わせる。

※本体とアタッチメントの△のマーク(P.7)を合わせてください。

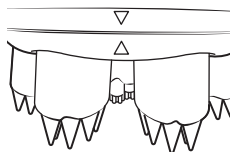

- 2 「カチッ」と音がするまでアタッチメントをはめ込む。

- ・ 上部のマークを合わせ、6ヶ所のツメにしっかりとめ込んでください。
- ・ 可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に沿わせるようにすると、取り付けやすくなります。

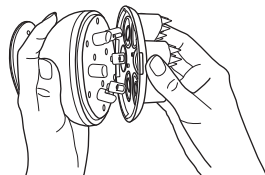


※ 取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。





●取り外しかた

- 1 アタッチメントのフックに指をかけ、持ち上げるようにして土台のプラスチック(枠)ごと外す。


※アタッチメントを取り外したときに、可動部受けが外れた場合には、紛失しないようご注意ください。また、ご使用の際には必ず可動部受けをアタッチメントに装着してご使用ください。

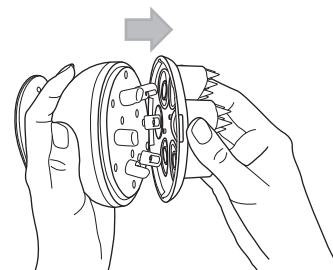

アタッチメントはゴム部分と透明な枠が重なっています。両方を合わせて本体から取り外してください。

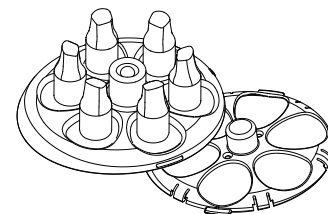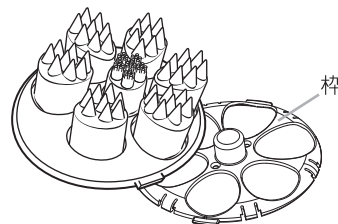


※アタッチメントのゴム部分のみを取り外さないようご注意ください。枠も取り外さないでアタッチメントの交換ができません。

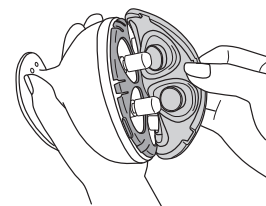


●アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合

枠が見当たらない場合は、本体に装着されていないかご確認ください。


※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

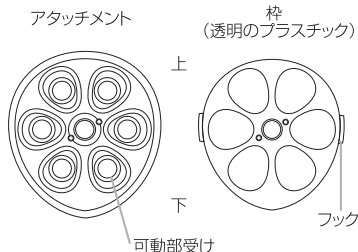


①アタッチメント中央部の突起と穴、左右にあるフックと穴を合わせてください。アタッチメントに枠を乗せ、下図のように穴に凸を合わせ押し出します。

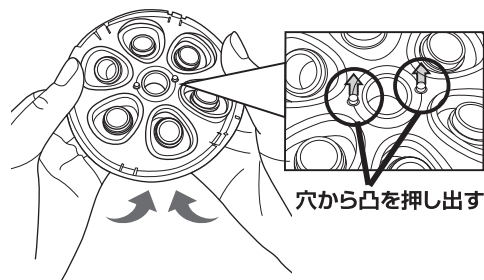


アタッチメント中央の突起を、
枠中央の穴に押し込んでください。

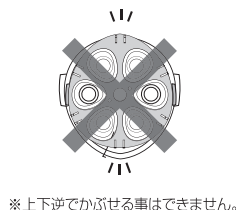

②アタッチメントの外周の耳部分を枠にかぶせていきます。

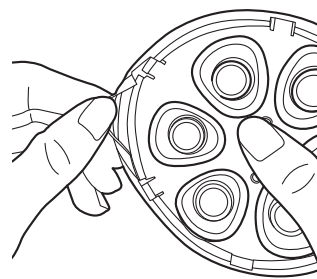


アタッチメントの縁を
枠に巻き付けるように取り付ける。

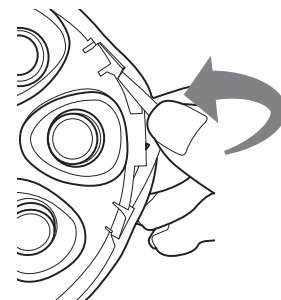


左右のフックに穴を
引っかける。

③本体とアタッチメントの矢印部分を合わせ、足を差し込みます。本体と密着させるように、「カチッ」と音がするまでアタッチメント外周を押し込みます。

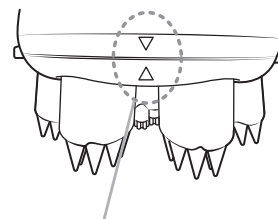

合わせる

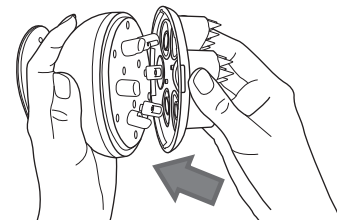

押し込む

・アタッチメント・枠の表裏上下を確認して取り付けてください。アタッチメントの表側の上部に△マークがあります。



警告

- 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある人は使用しない。
事故、お肌や身体のトラブルを生じる原因となります。
- 使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、頭皮やお肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。
万一、頭皮やお肌に異常があらわれた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。



注意

- 使用するときは、必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する。
- お顔に使用するときには、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けLOモード/タップ1で使用する。
- 次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつきの、髪を傷める原因となります。
 - ・植毛をされている人
 - ・部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の入
- 次の項目は行わない。
事故やトラブルの原因となります。
 - ・ブラシを強く押しつけたり、早く動かしたりしない。
 - ・過度に1ヶ所に集中して使用しない。
 - ・髪の毛がからみついたときは、本体を停止させてからからんだ髪の毛を外す。
- 使用時間を守って使用する。下記の使用時間を目安に使用する。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。
- シャンプーなどを使った場合は、必ず水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
におい・変色・故障の原因となります。
- 軽くあて、絶対に強く押しあてない。
痛みや異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

使用時間の目安

- 1部位1回約5分、1日合計20分を目安に使用してください。
お顔に使用するときには、お顔全体で約5分、頭皮に使用するときには、頭皮全体で約5分を目安に使用してください。
過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。

頭皮の皮脂洗浄ケア

1 シャンプーで髪全体を泡立てる。

- ・ほかの頭皮ブラシとの併用はオーバーケアの原因となりますのでおやめください。




2 図のように本体を持つ。

- ・落とさないようにしっかりと持ってください。



3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、好みのパターンを選択する。

- ・ボタンを押すたびにパターンが切り替わります。(P. 9のモードとランプ表示 参照)
- ・初めてお使いになる場合は、LOモード/タップ1で使用してください。
- ・アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。

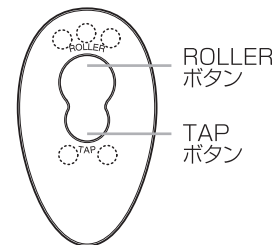

ブラシ全体が頭皮にあっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている


4 前頭部と側頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
 - ② 生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせる。
 - ③ ①、②を2回くり返す。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源が切れることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。




5 後頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 生え際から頭頂部へ向かって約5秒間かけてゆっくりすべらせる。

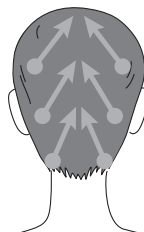


6 頭頂部と後頭部をケアする。

- 頭頂部(右図A)に約20秒間軽くあてる。
右図のように頭頂部からえりあしに向かって約5秒ずつ押しあてて移動する。

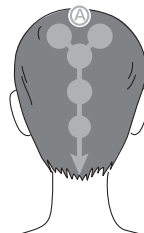

7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

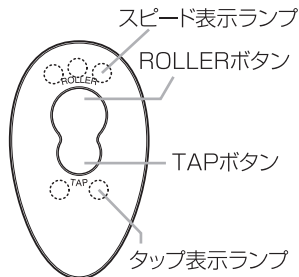

8 シャンプーを洗い流し、通常のお手入れをする。

- ・ シャンプーを洗い流した後は、通常のお手入れをしてください。(コンディショナー・トリートメント・ヘアパックなど)



● シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

フェイスラインのケア

必ずもみ出しアタッチメントを取り付けLOモード/タップ1で使用する

お肌をぬらした状態での使用をおすすめします。
入浴中や化粧水、ジェルなどでお肌を湿らせてご使用することをおすすめします。
メイクを落としてからのご使用をおすすめします。


1 図のように本体を持つ。

- ・ 落とさないようにしっかりとってください。




2 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、必ずLOモード/タップ1を選択する。

- ・ お肌にアタッチメントを、垂直に軽くあててください。
- ・ 強く押しあてないでください。

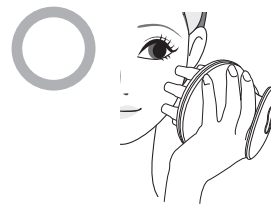

アタッチメント全体がお肌に垂直にあたっている

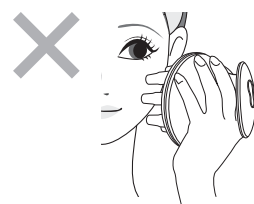

アタッチメントの一部がお肌から浮いている

3 お顔をケアする。

あごからこめかみにむけて、フェイスラインに沿ってゆっくりすべらせる。各10回くり返す。



・アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。お肌に軽くあててください。

※目もとと頬骨の上を避けてすべらせてください。

※アタッチメントを強く押しつけるとお肌を挟んで強い痛みを感じる場合があります。

その場合は軽く押しあてて「気持ちいい」と感じる強さでご利用ください。

※洗顔料を使用した後は、必ず水で十分に洗い流してからご利用ください。

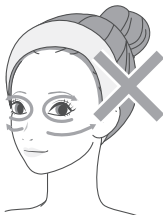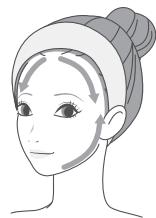

目もと、頬骨の上には
使用しない

4 首と肩まわりをケアする。



① 耳の後ろから鎖骨に向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。

② 鎖骨の下側を肩へ向かって約5秒ずつ押しあてて移動させる。

③ ①と②を3回くり返す。

※ のどぼとけや鎖骨にあてないようにすべらせてください。

④ 首の後ろ側と肩まわりを右図のように押しあてて移動させる。

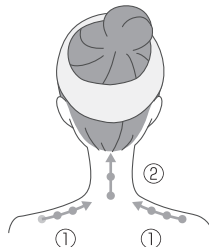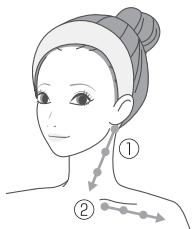

● 押しあてる

➡ 矢印の方向へすべらせる

5 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

・表示ランプが消灯し、電源がオフになります。

・ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。



注意

●お顔に使用する際は、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けLOモード／タップ1で使用する。
ニードルアタッチメントを使用したり、MID、HIで使用するとうけがの原因となります。

頭皮のもみ上げケア

頭皮用トリートメント剤などを一緒に使うとき

育毛剤などの頭皮用トリートメント剤をご使用になる場合は、頭皮へ頭皮用トリートメント剤を塗布して通常の使いかたをした後、本製品を使用してください。

※頭皮用トリートメント剤を使用した後は、本製品を必ず水で十分に洗い流してください。

1 頭皮用トリートメント剤をつける。



2 図のように本体を持つ。

・落とさないようにしっかりと持ってください。



3 ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンにし、お好みのパターンを選択する。

- ・ ボタンを押すたびに、パターンが切り替わります。
- ・ 初めてお使いになる場合は、LOモード／パターン1から使用してください。
- ・ アタッチメント全体が頭皮にあたるように、垂直に軽く押しあててください。



ブラシ全体が頭皮に
垂直にあたっている



ブラシの一部が
頭皮から浮いている

4 側頭部をケアする。


- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
 - ② 生え際から頭頂部へゆっくりすべらせる(約5秒)。
 - ③ ①、②を2回繰り返す。
- ・ アタッチメントを強く押しつけると安全機能が働いて電源がオフになることがあります。安全機能が働かない程度の強さであててください。



- 押しあてる
- 矢印の方向へすべらせる


5 後頭部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 中央に約5秒間軽くあてる。
- ③ 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ④ 左右の位置を変えて①～③を2回繰り返し、後頭部全体をケアする。

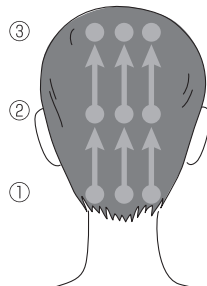

6 頭頂部をケアする。

- ① 生え際に約5秒間軽くあてる。
- ② 頭頂部に約5秒間軽くあてる。
- ③ 左右の位置を変えて①～②を2回繰り返し、頭頂部全体をケアする。

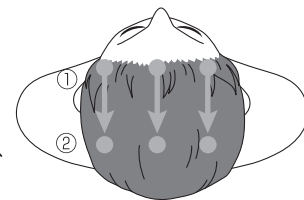

- 押しあてる
- 矢印の方向へすべらせる

7 ケアが終わったら、ボタンを長押し(約3秒)して電源をオフにする。

- ・ 表示ランプが消灯し、電源がオフになります。
- ・ ボタンを長押ししなくても、動作開始から約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。



注意

●シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いしてください。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。

部位別モードの選びかた

※お好みに応じて各モードを組み合わせるパターンを選択してください。
※各部位の使用モードは必ず守ってください。

	頭皮	フェイス	首・肩
ROLLER	LO MID HI	LOのみ	LO MID HI
TAP	タップ $\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$	タップ1のみ	タップ $\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$

使い終わったら

お手入れのしかた

使用後は本体を清潔に保つために、毎回お手入れをしてください。



警告

使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源がオフになっていることを確認する。

2 本体についている髪の毛や汚れを洗い流す。

- ・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。




3 本体からアタッチメントを取り外す。


- ・ アタッチメントの取り外しかたについては、「取り外しかた」(P.12)を参照してください。

4 アタッチメントを枠から取り外す。

- ※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

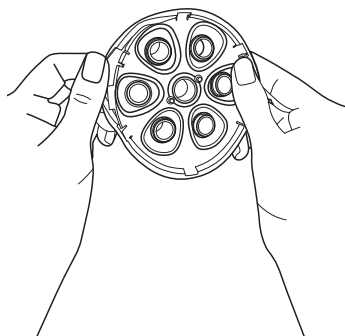

5 うすめた中性洗剤でアタッチメントと枠についている汚れを落とした後、水で洗い流す。

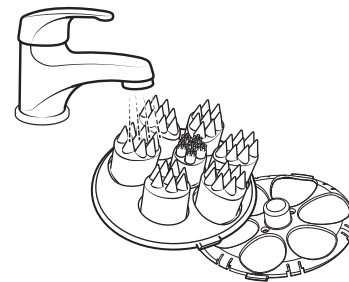


6 タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメント・枠の水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

- ・ 特に充電端子には水分が残らないように、綿棒などで拭き取ってください。
 - ・ 湿ったままの状態では置かないでください。
- 故障・においの原因となることがあります。

7 アタッチメントに枠を取り付ける。

- ・ 枠が見当たらない場合は、本体に装着されていないかご確認ください。
 - ・ 枠の取り付けかたについては、「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.13)を参照ください。
- ※アタッチメントは柔らかい素材です。強く引っ張ると破れることがありますので、破れないよう注意してお取り扱いください。

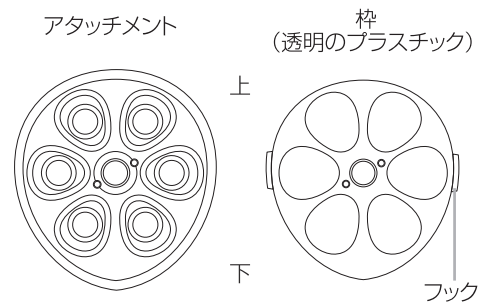

使い終わったら

困ったときは

本製品をご使用中に異常を感じたら、以下の症状がないかご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	ROLLERボタンまたはTAPボタンを押していない	いずれかのボタンを 長押し(約3秒) して電源をオンにしてください
	充電がされていない	壁面コンセントで充電してください(P.10)
充電しても数分しか使えない	充電電池の残量不足	販売店またはヤーマンコールセンター(P.28)にご連絡ください ※故障の原因となるためお客様では交換できません
	充電電池の寿命	
充電が開始されない	ACアダプターがコンセントに差し込まれていない	ACアダプターをコンセントに差し込んでください(P.10)
	充電台に本体がしっかりセットされていない	充電端子の水滴を拭き取り、本体と充電台の充電端子が触れるように置いてください。
途中で停止する	充電電池の残量不足	充電してください(P.10)
	オートオフ機能が働いた	動作を開始してから約5分経過すると自動的に停止します(P.9)
	安全機能が働いた	アタッチメントを強く押しつけたり髪の毛がからみつくと一定の負荷がかかると安全機能が働きます



- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因となります。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合は、必ず水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因となります。
- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。万一、浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流す。
においや変色の原因となります。
- 使用後は必ず本体の水分を拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置しない。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因となります。

保管のしかた

- 使用後は、必ず水分を拭き取り、十分に乾燥させてから保管してください。本体に水分がついた状態で放置すると、充電端子や本体内部が腐食する原因となります。
- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.26)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P.28)までご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はヤーマンコールセンター(P.28)までご相談ください。

よくあるご質問

Q	A
どれくらいの頻度で使用すれば良いですか？	●1部位1回約5分、1日合計20分を目安にご使用ください。お顔に使用するときは、顔全体で約5分、頭皮に使用するときは、頭皮全体で約5分を目安にご使用ください。過度の使用はお肌や頭皮を傷める原因となります。 ●お肌や頭皮に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
乾いた髪に使用してもかまいませんか？	頭皮のケアとして、乾いた髪に使用することもできます。
頭皮以外にも使えますか？	使用できます。 お顔に使用するときは、必ずもみ出しアタッチメントを取り付けLOモード/タップ1にしてください。
アタッチメントがうまく取り付けられないのですが	●アタッチメント(ゴム部分)に、土台のプラスチック(枠)がついているかどうか、ご確認ください。 ●プラスチック(枠)からアタッチメント(ゴム部分)が外れてしまっている場合は、土台のプラスチック(枠)にアタッチメント(ゴム部分)をかぶせ、本体に取り付けてください(「アタッチメントのゴム部分と枠が外れてしまった場合」(P.13)参照)。 ●それでもアタッチメントを取り付けにくい場合は、可動部と穴を合わせ、電源ボタンを押して電源をオンにします(LOモード)。可動部の動きに合わせてアタッチメントを本体に添わせるようにすると、取り付けやすくなります。 ※取り付けの際は指を巻き込まないように十分に注意してください。
うまくアタッチメントが取り外せないのですが	アタッチメントの左側か右側のフックに指をかけて土台のプラスチック(枠)ごと外してください(「取り外しかた」(P.12)参照)。
お風呂で使用中に水が出てきます	異常ではありません。
お風呂で使用後、本体を振ると水の入った音がします	異常ではありません。 本体・アタッチメントの水分をよく拭き取り風通しの良い場所で乾燥させてください(「お手入れのしかた」(P.23～24)参照)。

アフターサービス

充電池について

- 充電池は消耗品です。(保証対象外)
- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます(充電回数は300回が目安です)。
- 充電池交換をご希望の場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(下記)にご相談ください。

廃棄について

- 本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。



お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など
0120-776-282(通話料無料)
携帯電話・PHS
0570-550-637(通話料有料)

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあっております。お急ぎでない場合、火～金曜日の午後2時以降はお電話が比較的つながりやすくなっております。

●製品仕様

定 格	DC5V 0.5A
消 費 電 力	約3W(充電時)
外 形 寸 法	本体:約W97xD105×H103(mm)(アタッチメント除く) コードの長さ:約1.1m
製 品 質 量	本体:約287g(アタッチメント除く)
材 質	本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、 アタッチメント:シリコン、ポリカーボネート 充電台:ABS樹脂
製 造 国	中国
セ ッ ト 内 容	本体..... 1台 ニードルアタッチメント..... 1個 もみ出しアタッチメント..... 1個 充電台..... 1台

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品・付属品は除く)。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、送料ご負担のうえ実費で修理させていただきます。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.28)にご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - お客様の使用による劣化・消耗と認められる場合
 - 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - 以下①～⑩が原因による故障および損傷の場合
 - 使用上の誤り
 - お買い上げ後の輸送、転倒・落下
 - 弊社以外の第三者による修理・改造
 - 高温・多湿等の温度・湿度の使用環境
 - 接続する他の機器の異常
 - (家庭用製品の業務用使用等)想定を大幅に超える長時間又は異常電圧下での使用
 - (説明書等で指定がある場合)指定方法以外での給電
 - 非純正部品の使用
 - 車両・船舶への搭載
 - 海外でのご使用
 - 火災・地震・水害・その他の天変地変、公害、戦争・紛争による故障および損傷の場合
 - 落下・水没・盗難・紛失等、お客様に過失がある損害の場合
 - 改造・分解の形跡がある場合
 - 説明書、注意書等で弊社からの案内した使用方法に反する方法又は弊社の想定しない方法でのご使用が確認された場合
 - 保証書又は明細書のご掲示が無い場合又は、お買い上げ年月日・販売店名欄の記入又は押印が無い、あるいは字句を書き換えられている場合
 - 弊社販売記録などにに基づき、譲渡、転売、中古品(オークション購入や個人売買、その他正規販売店以外からの購入等を含みます)と判断した場合
 - 製造から相当の期間を経ており、修理・交換用品の手配が難しい場合
 - その他上記に準じる理由により、無償修理が適切でないと弊社が判断した場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ

「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>)および

「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty-rule/>)をご確認ください。