


..... MYTREX

REBIVE

SEAT

取扱説明書

家庭用電気マッサージ器

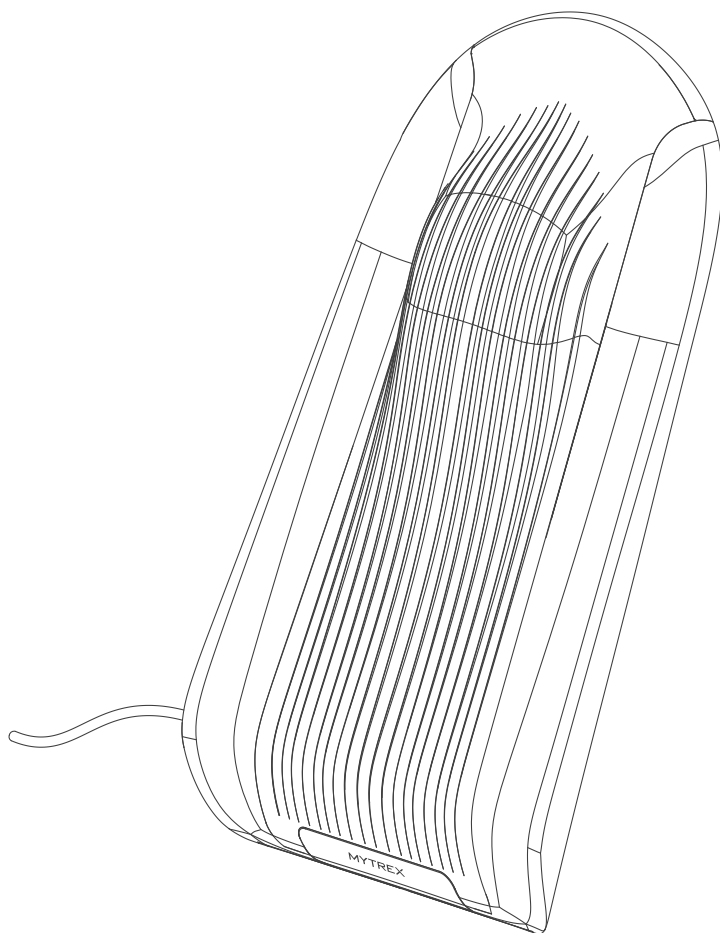

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について：誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



危険

誤った使い方をすると、「人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「損傷を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



危険



禁止

次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

- ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- 人工心肺など生命維持用医用電子機器
- 心電計などの装着型医用電子機器



警告



禁止

視覚障害のある方は1人で使用しない。

けがや体調不良の原因になります。

次のような方は使用しない。

事故や肌・身体のトラブルの原因になります。

- 心臓疾患のある方、血栓のある方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 乳幼児や子ども
- 妊娠中、または妊娠の可能性のある方
- 医師にマッサージを禁じられている方
例) 血栓症、塞栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
(皮下組織の炎症を含む。) など
- 骨折、整形などで背中や腰に埋め込み手術を受けた方
- 飲酒している方



警告



禁止

次の部位には使用しない。

肌・身体のトラブルの原因になります。

- 整形手術をした部位
- 皮膚の下に金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位
- 皮膚トラブルのある部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている部位
- 背中、腰以外の部位

他の治療器との同時使用や、塗り薬(スプレー式などを含む)との併用はしない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

体調が優れないときや、眠気がある時、飲酒時や、食後すぐは使用しない。

また、飲食・喫煙・運転をしながら使用しない。

事故やケガの原因になります。

小さな子供に使用させない。本製品で遊ばせない。ペットには使用しない。

事故やけが、体調不良の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、定格容量以外での使用はしない。

破損・発火の原因になります。

高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で保管・使用しない。

加熱したり、火中に投下しない。

発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。

本体のカバーを故意にはずしたり、破いたり、切ったりしない。破れがある場合は使用しない。

事故やケガの原因になります。

本体や付属品の差込口、すきまなどにピン、異物、ゴミ、水分を付着させない。

感電やショート、発火の原因になります。

電源コードを本体などに巻き付けない。

コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。

ACアダプターおよび電源コードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。

また、重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。

感電、ショート、発火、故障の原因になります。

電源コードを抜くときは、先端部分を持ちコードを引っ張らない。

感電やショート、発火の原因になります。

付属のACアダプターおよび電源コード以外は使用しない。

付属品は他の製品には使用しない。

故障や事故の原因になります。

ACアダプターおよび電源コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

感電やショート、発火の原因になります。

警告



ぬれ手禁止

濡れた手で本体や電源プラグ、リモコンに触れない。
感電やショート、発火の原因になります。



水場禁止

本体および付属品に水をかけたり、浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。
火災や感電、けがの原因になります。



分解禁止

分解や修理、改造をしない。
発火したり、故障や事故の原因になります。



必ず守る

次のような方は医師と相談して使用する。
事故やけが、体調不良の原因になります。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 悪性腫瘍のある方
- 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- 薬を服用中の方
- 生理中の方、出産直後の方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 皮膚に創傷や湿疹、はれものなど異常ある方
- 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある方、衰弱している方)
- 体調不良、身体に異常を感じている方
- 骨折、骨粗しょう症、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疾患(疼痛性)のある方
- 背骨に異常のある方、背骨が左右に曲がっている方
- 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの方
- 医療機関で治療中の方
- かつて治療や手術を受けたところ、または疾患部へ使用する方
- 体力が極端に衰えた方
- 自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方

使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する。
医師に相談のうえ指示に従ってください。

警告



必ず守る

本製品を使用するときは、使用部位から金属、アクセサリ、ベルト類を外す。
また、マフラーなどは外して使用する。
事故やケガの原因になります。

しばらく使用しても効果が表れない場合は、使用を中止し医師または専門医に相談する。
体調不良の原因になります。

電源プラグはタコ足配線にせず、壁のコンセントに直接根元まで差し込む。
火災・感電・故障の原因となります。

本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する。
破損・発火の原因になります。



電源プラグを
を抜く

本体および付属品から異臭・異音・煙が発生した場合、内部に水などの異物が入り込んだ
場合は、直ち使用を中止しコンセントから電源プラグを抜く。
体調不良の原因になります。

注意



禁止

家庭用マッサージ器以外の用途には使用しない。また、頭やけい部へは使用しない。
事故やけが、故障の原因になります。

本体の上にのったり、座ったりして使用しない。
転倒による事故やけが、故障の原因になります。

同一箇所に過度に集中して使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。同一箇所への使用は3分以内を目安にして
ください。

強く押しつけて使用しない。
事故やけが、体調不良の原因になります。特に背中の上部は振動スピードに注意し、
遅めの振動スピードで使用してください。

本製品を床に敷いて寝そべった状態で使用しない。また、体重が過度に本体にかかる
ような使用はしない。
事故やけが、故障の原因になります。

不安定な場所で保管しない。
また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
けがや本体が破損、故障する原因になります。

使用中は、リモコンや操作ボタンを使用者以外に触らせない。
ケガや思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

ご使用前に、各操作ボタンおよびタイマー(10分間)が正常に動作するか確認する。
動作不良があると、事故やけがの原因になります。

1回の使用時間は10分以内とし、1日2回までを限度として使用する。
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、けがをまねくことがあります。
なお、複数の方が使用する場合は、連続使用の合計時間を30分以内としてください。
連続使用後は最低30分間以上機器を停止させてから再度で使用ください。
本体が熱くなって、故障の原因になります。

慣れないうちは遅めの振動スピードおよび短時間から使用する。
強い刺激に慣れていないとけがの原因になります。

故障や不具合が生じた場合は、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートに
相談する。
お客様ご自身では分解や修理などをしないでください。保証の対象外となります。

⚠ 注意



電源プラグを
を抜く

お手入れする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で行う。
火災や事故の原因になります。

停電したときや雷が鳴り始めたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電、故障の原因になります。

セット内容

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

本体	MYTREX リバイブシート25	1台
付属品	電源コード&ACアダプター	1セット
	リモコン	1個
	リモコン用電池(単4形乾電池)	2個
	取扱説明書	1部
	添付文書	1部


※付属電池はお試し用のため、通常より消耗が早い場合があります。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

操作ボタンと各機能

リモコン

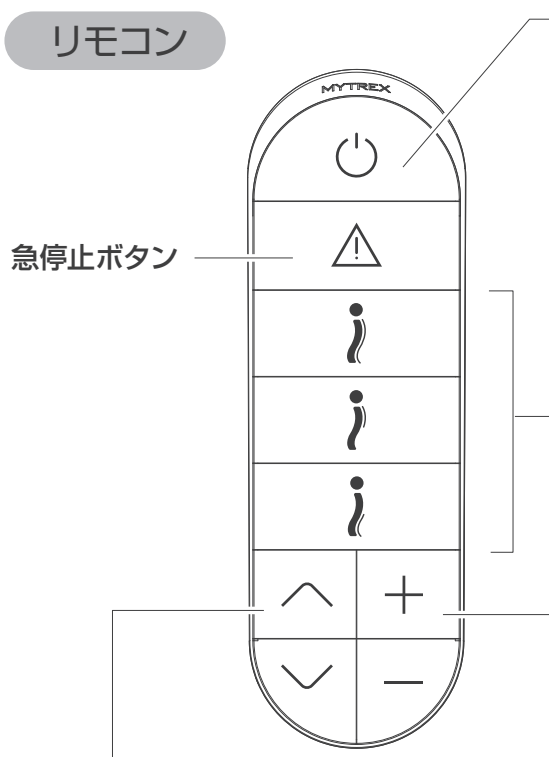

電源ボタン

電源をオン/オフにします。

自動コース

4つのもみ玉で揉みながら、
2つのガン玉でたたきます。

※ガン玉たたきのデフォルトは
レベル1です。レベルを上げるには
+ボタンを押してください。

※-ボタンを押すとたたきを停止し、
もみだけのマッサージを行います。



全範囲ボタン

背中～腰まで全体をマッサージします。



上部ボタン

背中の上部を重点的にマッサージします。



下部ボタン

背中の下部～腰を重点的にマッサージします。

へボタン/ゝボタン

押すと自動コースを停止し、マニュアル
コース(ガン玉たたき)を開始します。
長押しするとたたき位置を上下に移動
します。ボタンから手を離すと選択した
位置でガン玉たたきマッサージを行いま
す。

※-ボタンを押してガン玉たたきレベルを0
(たたきなし)に設定している場合は動作し
ません。

※たたき可動範囲の一番上または下の位置に
くると、電源ボタンのLEDライトが点滅して
お知らせします。

+ボタン/-ボタン

ガン玉たたきの振動レベルを設定します。
ボタンを押すたびに振動レベルが変化します。
振動レベルは8段階から選択できます。

振動レベル	1分間当たりの回転数
レベル8	1800
レベル7	1580
レベル6	1430
レベル5	1280
レベル4	1030
レベル3	850
レベル2	650
レベル1	450
レベル0	0

速い

ゆっくり

停止

※レベル8選択時に+ボタンを押したり、レベル0選
択時に-ボタンを押すと、電源ボタンのLEDランプ
が2回光って最大レベル/最小レベルで使用して
いることをお知らせします。

電池交換のしかた


操作はリモコンで行います。

初回使用時や電池残量が少なくなったとき(本体の反応が弱くなったとき)は、リモコンに新しい電池を取り付けてください。

1

リモコン裏面にある電池カバーを取りはずす。

※電池カバー上に記載の矢印の方向に押しながら(①)、上に持ち上げて(②)取りはずします。

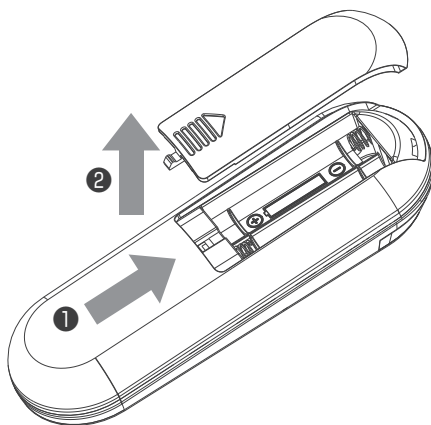

2

+極、-極の向きを電池ケース内の表示と合わせて、単4形アルカリ乾電池を2本入れる。


※+極、-極の向きに注意して正しく入れてください。

※新しい電池とすでに使用した電池、種類の違う電池を混ぜて入れないでください。

3

電池カバーを取り付ける。

※電池カバーの突起部周辺をしっかりと押し、「カチッ」と音がするまでカバーをしっかりと閉めてください。

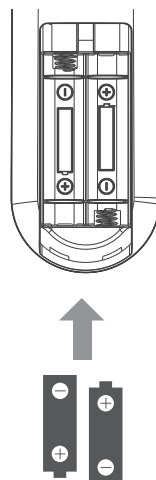

はじめにお読みください

初回で使用前や、しばらく使用していなかった場合は、各操作ボタンおよびタイマー（10分間）が正常に動作するか確認してください。

異常が発見された場合はそのまま使用せず、カスタマーサポートにご相談ください。

本製品は、あんま、マッサージの代用を目的としており効果の表示が認められています。

使用目的または効果

疲労の回復

血行の促進

筋肉の
疲れをとる

筋肉の
こりをほぐす

神経痛・
筋肉痛の痛みを
やわらげる

※一般家庭で使用する。 ※上記以外の目的には使用しないでください。

設置方法

！ 注意

※キャスター付きの椅子や回転椅子では使用しないでください。転倒による事故やケガの原因になります。


※リクライニング機能のついた椅子でご使用になる場合は、使用中に背もたれを倒したりしないよう、十分ご注意ください。

※座椅子などでご使用になる場合は、ホットカーペットの上での使用はおやめください。

※椅子に傷がつく恐れがある場合は、本体との間に傷防止用の敷物などを挟んでください。


※電源コードやACアダプターを接続する際は、根元までしっかりと挿し込んでください。

※椅子の角度は140°を超えないでください。

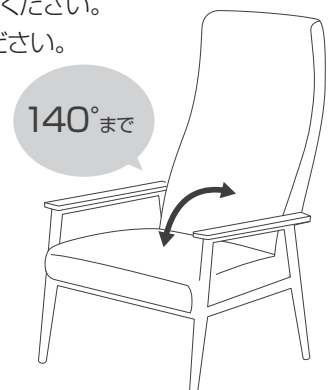

設置方法


- 1 | 安定した背もたれのある椅子などに本体を設置します。
※固定ベルトで椅子に固定することもできます。

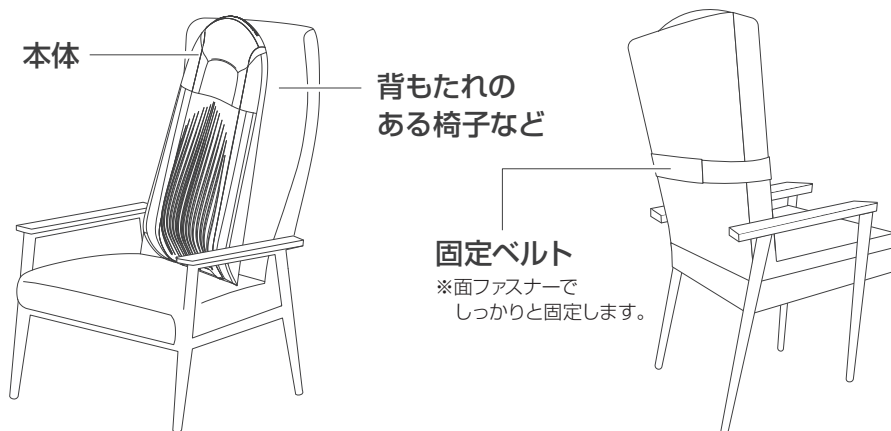

- 2 | 本体のACアダプター差込口にACアダプターを接続し、電源コードをACアダプターに接続し、コンセントに電源プラグを根元までしっかりと挿し込みます。

●ACアダプターのLEDランプが赤色に点灯します。

※すべてのコードは正確に確実に差し込むように注意してください。

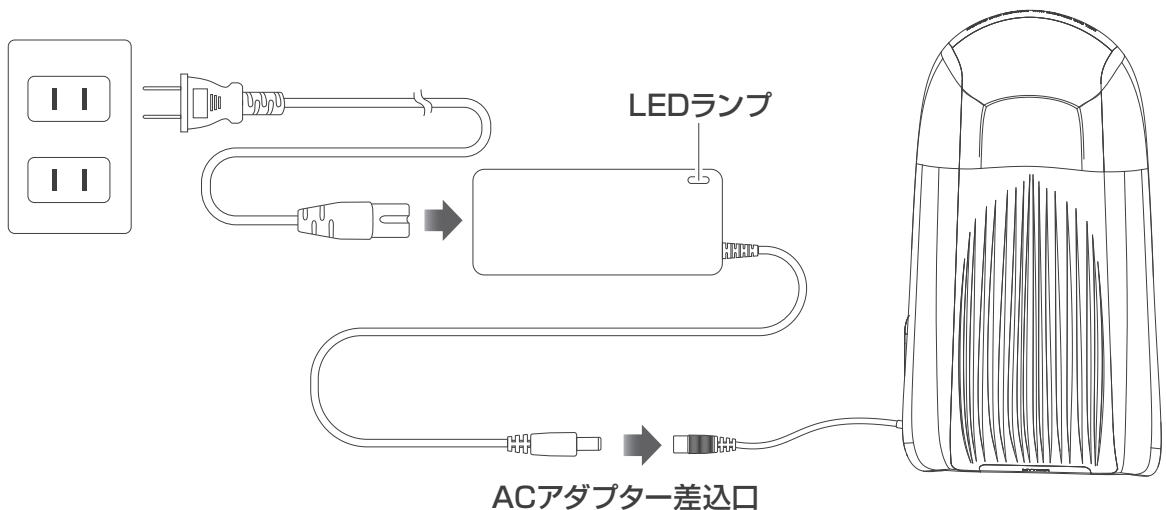

ご使用方法

1 本製品が設置されている椅子に深く座る。

※寝そべった状態で使用しないでください。また、体重が過度にが本体にかかるような使用はしないでください。圧力をかけすぎると、保護のために電源がオフになります。再度使用する場合は、電源をオンにしてください。

2 リモコンの電源ボタンを押してオンにする。

●全範囲コース(もみ+ガン玉たたき:振動レベル1)で動作を開始します。

※もみ玉およびガン玉が最下位にない場合は定位置まで戻って電源がオフになる場合があります。

3 コースを選択する。

自動コースの場合

※全範囲、上部、下部コースから選択することができます。

コースの詳細については、「操作ボタンと各機能」(9ページ)をご参照ください。

マニュアルコースの場合

※ $\wedge$ ボタン/ $\vee$ ボタンを押し、ガン玉をお好みの位置に合わせて調整します。

※もみ玉は動作を停止します。

4 +/− ボタンを押してガン玉たたきの振動レベルを調整する。

※振動レベルは8段階から選択することができます。

※強さが足りないときは、体重を本体にかけるのではなく、+ボタンで振動レベルを上げてく
ださい。

※ガン玉たたきを停止するには−ボタンを押して振動レベル0(たたきなし)を選択します。

5 途中でマッサージを終了する場合は、電源ボタンを押してオフにする。


※リモコンの電源ボタンのLEDランプが点滅しながら、もみ玉およびガン玉がゆっくり下に移
動し、マッサージが停止して電源がオフになります。

※動作開始から10分間が経過すると自動で電源がオフになります。

緊急時や動作中に機器や体に異常を感じたときは！

急停止ボタンを押します。マッサージが急停止し、電源がオフになります。

※再度電源を入れると定位置まで戻って電源がオフになります。

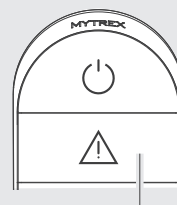

急停止ボタン

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。
- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- 乾いたやわらかい布で本体およびリモコンの汚れをふき取ってください。
- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってから本体表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。その後、乾いた布で乾拭きをしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

保管方法

- 使用後は本体の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- 電源コードがねじれている場合は、ねじれを直して保管してください。
- 汚れやホコリが付着しないよう、カバーなどをかけて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届く場所や、ペットが触れる場所、本製品でつまづくような場所での保管はおやめください。

廃棄について

- 廃棄する際は、各自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。絶対に分解したり、修理や改造はしないでください。

症状	確認していただくこと
電源を入れても動かない	●本体、ACアダプター、電源コードが正しく接続されているか確認してください。 ●リモコンのLEDランプがつかない場合は、新しい電池に交換してください。 ※上記を試しても動かない場合は、本体とリモコンのペアリングをお試しください。 【ペアリング方法】 1.本体、ACアダプター、電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。 2.リモコンの(緊急停止)ボタンと(－)ボタンを同時に2秒間押す。 →リモコンのLEDランプが点滅します。 3.リモコンのLEDランプが点滅している状態で、電源プラグを一度コンセントから抜き、再びコンセントに差し込む。 ※ペアリングが完了するとリモコンのLEDランプが消灯します。万一、リモコンが点滅し続ける場合は、再度手順3をお試しください。 ※リモコンが点滅してから1分以内に手順3を行ってください。1分以内にペアリングができないとキャンセルされます。再度手順1からお試しください。 ※リモコンを本体の近くに置いた状態でペアリングをしてください。
異音がする	●クッション性のある椅子やシートの上に設置してください。 ●本体の周辺に接触しているものがないか確認してください。 ●本製品は、構造上、ある程度の動作音がするため異常ではありません。
突然停止した	●タイマーにより開始から10分で停止します。

製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
販売名	MYTREX リバيبシート25
型番	MT-RBS-25M / MT-RBS-25M-B
本体定格	動作時 24V $\asymp$ 72W ACアダプター接続時 100V $\sim$ 50/60Hz 72W
ACアダプター	入力:100V $\sim$ 50/60Hz 1.8A 出力:24V $\asymp$ 3A (型番:KAP072B-2403000P)
サイズ	671mm $\times$ 350mm $\times$ 107mm
質量	約3.5kg(電源コード、ACアダプターを除く)
素材	ABS樹脂、シリコン、ポリエステル、ナイロン
使用環境	温度:5℃ $\sim$ 35℃、相対湿度: $\leq$ 90%RH
耐荷重	最大60kg
振動機能	L1: 450 $\pm$ 100回/分 L2: 650 $\pm$ 100回/分 L3: 850 $\pm$ 100回/分 L4: 1030 $\pm$ 100回/分 L5: 1280 $\pm$ 100回/分 L6: 1430 $\pm$ 100回/分 L7: 1580 $\pm$ 100回/分 L8: 1800 $\pm$ 100回/分
揉み機能	揉み回転数:28 $\pm$ 3回/分
定格時間	10分
一般的名称	家庭用電気マッサージ器(JMDNコード:34662000)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	307AKBZX00033000
製造販売元	株式会社 創通メディカル
製造国	中国

発売元:株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202501KB